



# 全自动定容仪



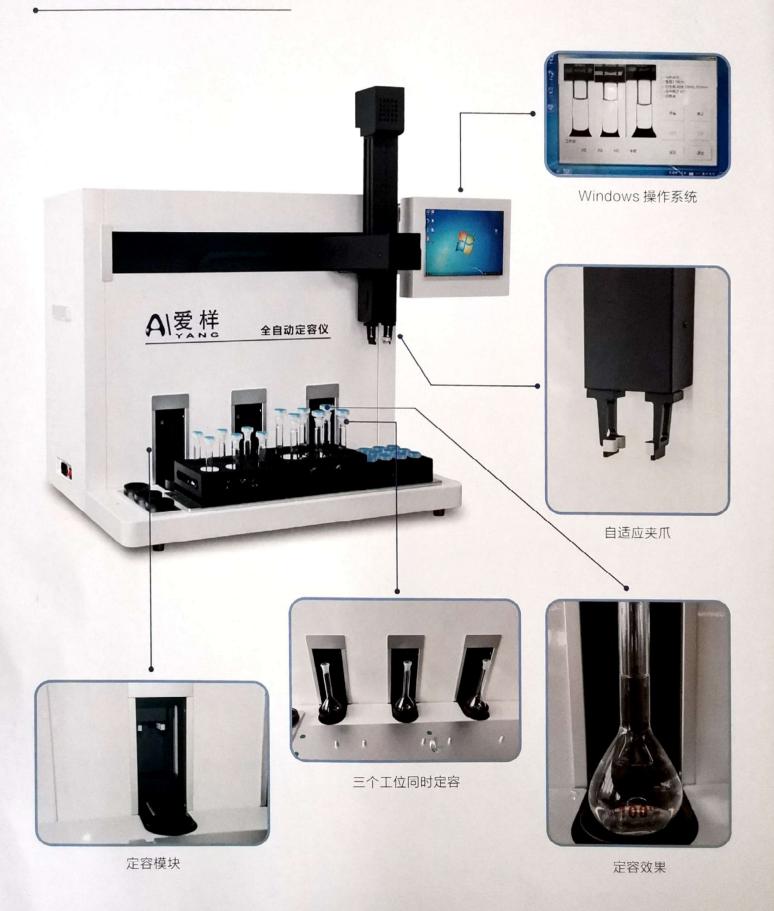

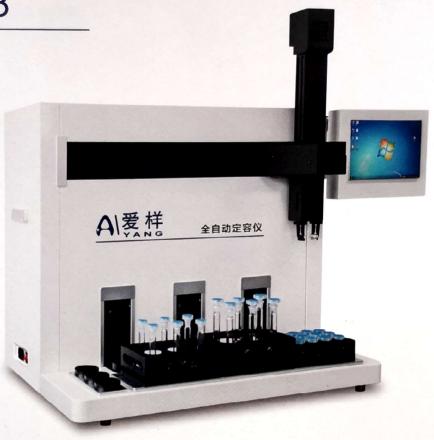

#### 仪器特点:

- ●利用采集的图像通过算法实现:寻线、加液、定容终点判断的功能实现定容操作自动化。
- ●内置定容模块,自动实现容量瓶抓取、光源控制、 加液控制、图像调整功能。
- ●三个工作位可同时进行定容操作,互不干扰。
- ●样品传输采用四氟管路。
- ●加液泵与液体接触部分采用耐腐蚀材料。
- ●自润滑机械臂减少日常维护,提高可靠性。
- ●自适应机械手实现对不同大小的容量瓶可靠抓取。

## 技术参数:

容量瓶类型:	透明
容量瓶规格:	50ml、100ml
定容精度:	±0.05ml
样品数量:	12
溶剂通道:	1
工作位:	3定容工作位
定容方式:	多通道同时定容
自动加盖:	有(适用于长磨口)

智能决策 自动定容





#### 仪器特点:

- ●利用采集的图像通过算法实现:寻线、加液、定容 终点判断的功能实现定容操作自动化。
- ◆内置定容模块,自动实现容量瓶抓取、光源控制、 加液控制、图像调整功能
- ●容量瓶混匀工作台:具有水平和垂直方向的混匀功能,可实现在定容前将容量瓶内溶液充分混匀,减少定容后的体积变化。
- ●三个工作位采用: 预加液、混匀、定容的顺序工作方式进行定容。
- ●有两个溶剂通道,方便切换定容溶剂(定容过程中 不可切换溶剂)
- ●可实现对棕色容量瓶进行定容。
- 样品传输采用四氟管路。
- •加液泵与液体接触部分采用耐腐蚀材料。
- 自润滑机械臂减少日常维护,提高可靠性
- 自适应机械手实现对不同大小的容量瓶可靠抓取。

#### 技术参数:

容量瓶类型: 棕色、透明

容量瓶规格: 10ml、25ml

定容精度: ±0.05ml

样品数量: 12

溶剂通道: 2

工作位: 预加液、定容、混匀

定容方式: 预加液-混匀-定容 顺序定容方式

自动加盖:有(适用于长磨口)

















## 天津爱样科技有限公司

地址:天津市华苑产业区(环外)海泰华科三路9号2号楼2层W201

电话: 022-23730883 18322154237

网址: www.tj-aiyang.com

邮箱: 18322154237@163.com